




TZ Medical
Sparked by your ideas

ÚTMUTATÓ BETEGEK SZÁMÁRA

TRIDENT™ NANO ELEKTRÓDA TAPASZ


1. lépés: A bőrterület előkészítése

Borotva segítségével távolítsa el az esetleges szőrzetet a választott bőrterületről. Ezután meleg szappanos vízzel dörzsölje át, majd törölje szárazra.

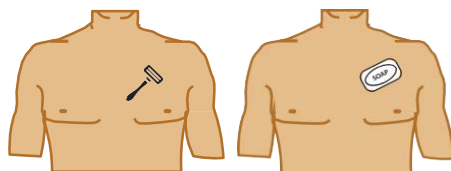


2. lépés: A csomag kinyitása

Nyissa ki a csomagot és vegye ki az elektróda tapaszt.

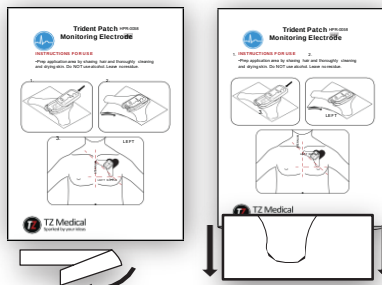


3. lépés: Az eszköz behelyezése

A tapaszon lévő képen látható módon csúsztassa az eszközt az elektróda tapaszba. Tartsa, amíg a zöld villogás abba nem marad, majd húzza le a védőfóliát az elektróda tapaszról.

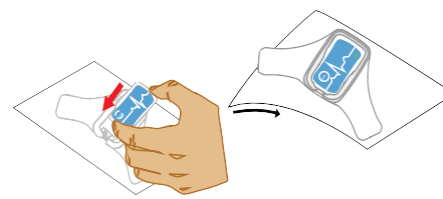


4. lépés: Az elektróda felhelyezése

Helyezze az elektróda tapaszt 45 fokos szögben a mellkasra. Az elektróda "szárnyai" legyenek a szegycsont és a bal mellbimbó közötti ferde tengelyen, miközben az eszköz a bal váll irányába mutat.

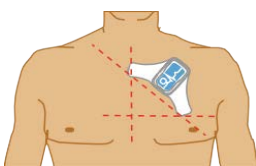

5. lépés: Az állapot ellenőrzése

Ellenőrizze a felvételi állapotot a „PUSH” gomb rövid lenyomásával. A fényjelzés 5-ször zölden villan.

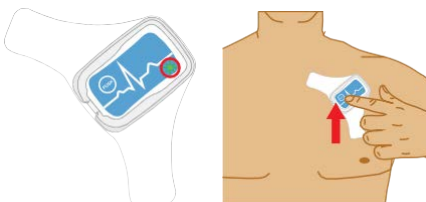

6. lépés: Állapotjelző fények

Felvétel



5-ször zölden villan



5-ször pirosan villan

Elektróda érintkezési hiba



5-ször sárgán villan



Zölden és sárgán villan



A felvétel elkészült



Töltés szükséges


7. lépés: Eseményrögzítés

Amennyiben bármilyen tünetet észlel az elektróda viselése során, a „PUSH” gombot 4 másodpercig nyomva tartva az esemény rögzítésre kerül. A LED jelzőfény zölden villog és az "Esemény rögzítve" hangjelzés hallható.



8. lépés: Az eszköz kivétele

Amint az adatrögzítés véget ért, az eszköz eltávolítható a „PUSH” gomb melletti alsó perem finom nyomásával, majd az eszköz kicsúsztatásával a tokból.

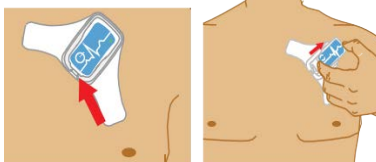

9. lépés: Töltés


Ha töltésre van szükség, a jelzőfény változva zöld-sárgán villog. Teljes töltöttség esetén a LED villogásból állandó zöld jelzésre vált. Ekkor kiveheti az eszközt a töltőből.



Az eszközzel kapcsolatos egészségügyi kérdésekkel kérjük, forduljon kezelőorvosához.

Amennyiben a készülékkel kapcsolatos technikai kérdése van, írjon emailt az sales@nextgenmed.hu címre, melyben tüntesse fel nevét és elérhetőségét (telefon, email, egyéb). Ügyfélszolgálati munkatársunk a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.

TRIDENT™ NANO

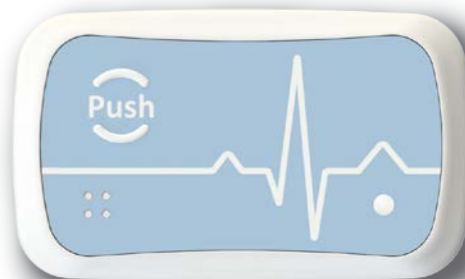

A vizsgálat során fontos, hogy tisztában legyen a következőkkel:



Kerülje el, hogy használat közben az eszköz vízbe merüljön vagy hirtelen nagy mennyiségű víz érje azt. Az eszköz vízhatlan, nem vízálló. Az optimális működés érdekében az eszköz nyílásait ne érje direkt vízszugár. Javasolt tusolás közben a zuhanyfejnek háttal állnia.



Hagyja teljesen megszáradni a választott bőrterületet és bizonyosodjon meg róla, hogy a terület teljesen tiszta, mielőtt az elektróda tapaszt felhelyezi.



Egyes esetekben nehéz lehet a LED villogását jól látni az eszköz viselése közben. Ilyenkor segítségünkre lehet, ha tükör előtt végezzük a „PUSH” gomb lenyomását.



Az eszköz behelyezése során a LED-hez közelebbi peremét tartsa finoman az elektróda tapaszhoz nyomva, amíg a zöld színű villogás abba nem marad. Ebben az esetben az eszköz megfelelően fog működni.



Amennyiben egy hosszabb vizsgálatához új elektródára van szüksége, mindig töltsse fel az eszközt.



Megjegyzés: A vizsgálat után javasolt az elektróda tapaszt zuhanyozás közben eltávolítani a bőrről. Szükség esetén használjon valamilyen ásványi olajat (pl. babaolaj) a ragasztóanyag könnyebb leoldásához.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:
NextGenMed Hungary Kft.
1136 Budapest, Tátra u. 5/A al. 2.
Tel: 06 30 551 6921
sales@nextgenmed.hu
www.nextgenmed.hu

Gyártó:
TZ Medical Inc.
17750 SW Upper
Boones Ferry Rd. #150
Portland, OR 97224
www.tzmedical.com
18905 R1.3



TZ Medical
Sparked by your ideas