




TZ Medical
Sparked by your ideas

ÚTMUTATÓ BETEGEK SZÁMÁRA

TRIDENT™ NANO NYAKPÁNT ELEKTRÓDA


1. lépés: A bőrterület előkészítése

Borotva segítségével távolítsa el az esetleges szőrzetet a választott bőrterületről. Ezután meleg szappanos vízzel dörzsölje át, majd törölje szárazra a területet.

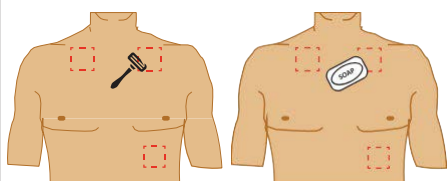


2. lépés: Az elektródák előkészítése

Helyezze fel a színnel jelzett elektróda tappancsokat, majd tegye a nyakába a nyakpánt elektródát.

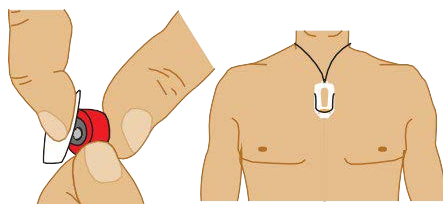


3. lépés: Az elektródák felhelyezése

Az elektróda tappancsokat helyezze fel az előkészített, száraz bőrterületre. Fontos, hogy az elektródák megfelelően tapadjanak a bőrre a képen látható pozíciókban.

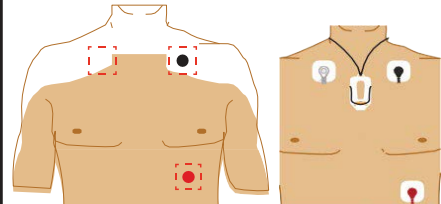


4. lépés: Az eszköz csatlakoztatása

Csúsztassa az eszközt a nyakpánt tokjába. Finoman tartsa, amíg a zöld villogás abba nem marad.

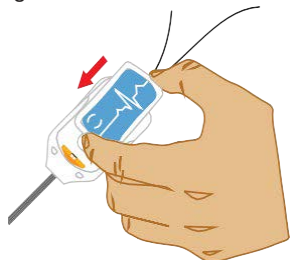

5. lépés: Az állapot ellenőrzése

Ellenőrizze a felvételi állapotot a „PUSH” gomb rövid lenyomásával. A fényjelzés 5-ször zölden villan.

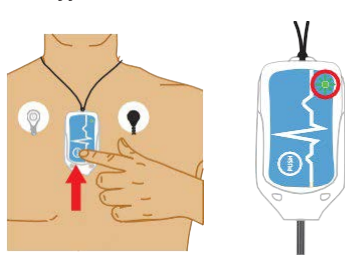

6. lépés: Állapotjelző fények

Felvétel

Elektróda érintkezési hiba



5-ször zölden villan



5-ször sárgán villan

A felvétel elkészült

Töltés szükséges




5-ször pirosan villan



Zölden és sárgán villan


7. lépés: Eseményrögzítés

Amennyiben bármilyen tünetet észlel az elektróda viselése során, a „PUSH” gombot 4 másodpercig nyomva tartva az esemény rögzítésre kerül. A LED jelzőfény zölden villog és az „Esemény rögzítve” hangjelzés hallható.

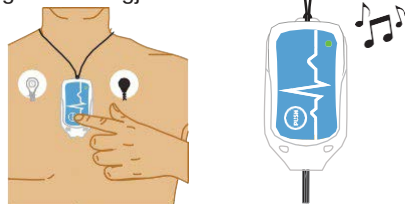

8. lépés: Az eszköz kivétele

Amint az adatrögzítés véget ért, az eszköz eltávolítható a „PUSH” gomb melletti alsó perem finom nyomásával, majd az eszköz kicsúsztatásával a tokból.

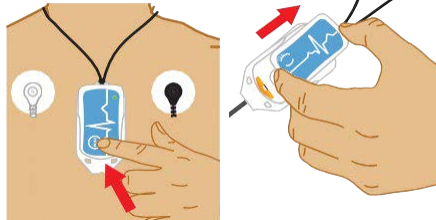

9. lépés: Töltés


Ha töltésre van szükség, a jelzőfény váltakozva zöld-sárgán villog. Teljes töltöttség esetén a LED villogásból állandó zöld jelzésre vált. Ekkor kiveheti az eszközt a töltőből.



Az eszközzel kapcsolatos egészségügyi kérdésekkel kérjük, forduljon kezelőorvosához.

Amennyiben a készülékkel kapcsolatos technikai kérdése van, írjon emailt az sales@nextgenmed.hu címre, melyben tüntesse fel nevét és elérhetőségét (telefon, email, egyéb). Ügyfélszolgálati munkatársunk a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.

TRIDENT™ NANO

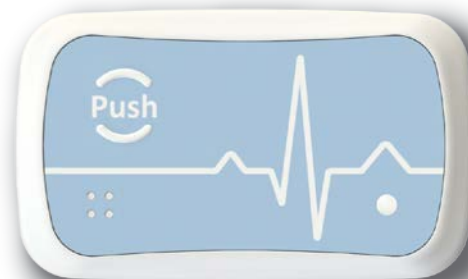

A vizsgálat során fontos, hogy tisztában legyen a következőkkel:



Ne engedje, hogy a nyakpánt elektródát víz, vagy jelentős mértékű pára érje. Csatlakoztassa le a kábeleket a mellkasra ragasztott elektródákról és zuhanyozás közben vegye le a nyakpánt elektródát. Ha az elektróda környéki bőrterületek teljesen szárazok, helyezze vissza a kábeleket, majd folytassa a vizsgálatot.



Hagyja teljesen megszáradni az elektródákat környező bőrterületet és az eszköz ismételt felhelyezése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a bőrterület teljesen tiszta.



Egyes esetekben nehéz lehet a LED villogását jól látni az eszköz viselése közben. Ilyenkor segítségünkre lehet, ha tükör előtt végezzük a „PUSH” gomb lenyomását.



Az eszköz behelyezése során a LED-hez közelebbi peremét tartsa finoman a csatlakozóhoz nyomva, amíg a zöld színű villogás abba nem marad. Ebben az esetben az eszköz megfelelően fog működni.



Amennyiben egy hosszabb vizsgálatához új elektródára van szüksége, mindig töltsse fel az eszközt.



Megjegyzés: A vizsgálat után javasolt az elektródákat zuhanyozás közben eltávolítani a bőrről. Szükség esetén használjon valamilyen ásványi olajat (pl. babaolaj) a ragasztóanyag könnyebb leoldásához.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:
NextGenMed Hungary Kft.
1136 Budapest, Tátra u. 5/A al. 2.
Tel: 06 30 551 6921
sales@nextgenmed.hu
www.nextgenmed.hu

Gyártó:
TZ Medical Inc. 17750
SW Upper Boones
Ferry Rd. #150
Portland, OR 97224
www.tzmedical.com



TZ Medical
Sparked by your ideas